Hurtigstart-guide

CORE 500™
Digitalt stetoskop

eko

Mød dit nye stetoskop.

Konfigurer din CORE 500™ på få minutter med vores introduktionsvideo.

Scan her

Har du brug for hjælp? Vi er her for dig.

Vores ekspertteam er her for at hjælpe dig med opsætning af enheden og daglig brug. Besøg **ekohealth.com/support** eller ring **+1-844-356-3384** for at tale med en agent.


Besøg **ekohealth.com/ifu** for andre sprog.

Trin 1: Download Eko-appen.

Scan her

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

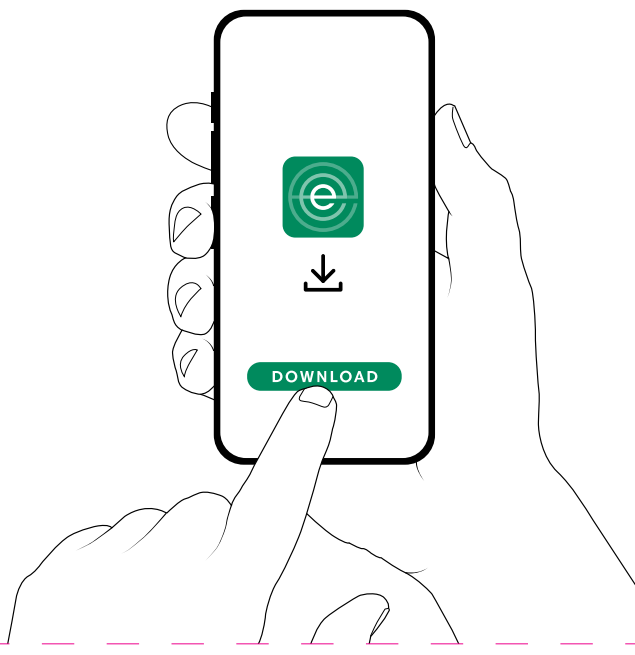

Trin 2: Indstil din CORE 500.


Følgende tips viser, hvordan du bruger dit nye stetoskop.


Fastgør ørestykket.

- Slut ørestykket til CORE 500. Mærket på CORE 500-stikket skal flugte med mærket på højre side af ørestykket.
- **Drej ørestykket en kvart omgang med uret, indtil det låses fast.** Mærket på CORE 500-stikket skal flugte med mærket på venstre side af ørestykket.

Tag ørestykket af.

- Drej ørestykket en kvart omgang mod uret, indtil det låses op.
- Tag ørestykket ud af CORE 500.

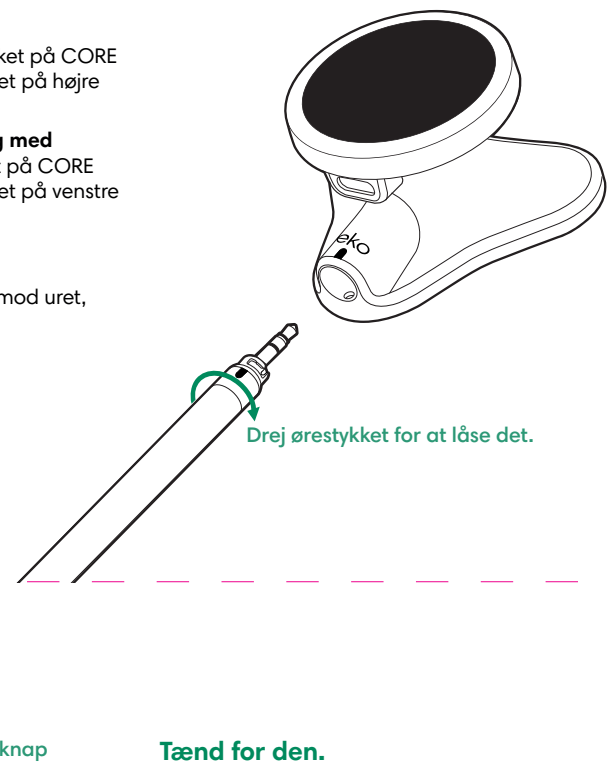

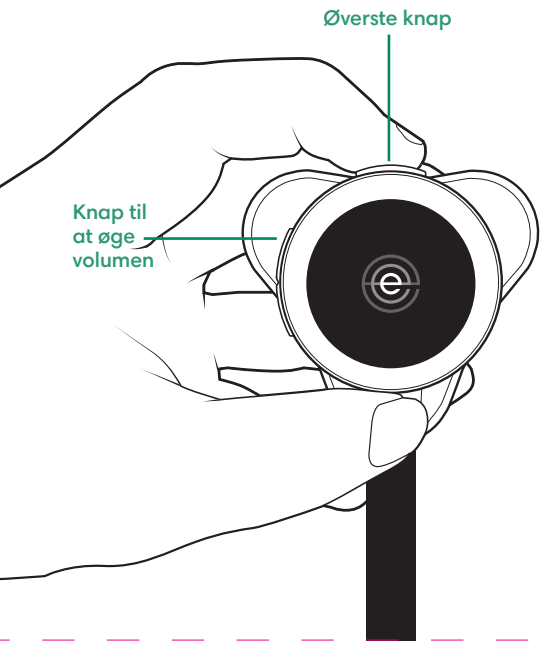

Tænd for den.

- Tryk på den øverste knap.

Sluk.

- **Hold den øverste knap nede, mens du trykker én gang på volumenknappen for at slukke den.** Når du ser bekræftelsesskærmen, skal du trykke på volumenknappen igen for at bekræfte.

Sove og vågne.


- CORE 500 går automatisk i dvale, når den ikke har været brugt i en kort periode. Saml den op på halsen af bryststykket for at vække den. Du kan slå denne indstilling fra i Eko-appen.

Trin 3: Opret forbindelse med Eko-appen.

Bluetooth-ikonet vises på CORE 500-skærmen, når der er forbindelse.


- Åbn Eko-appen, og log ind.
- **Følg instruktionerne på skærmen** for at parre din enhed.
- Tryk på volumenknappen for at bekræfte parringen for første gang.



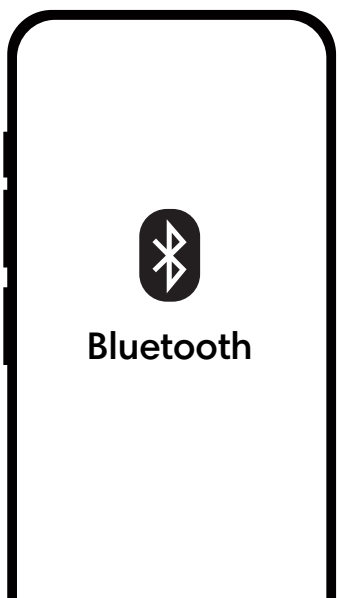

Trin 4: Opret en konto, og aktiver Eko+.

Din CORE 500 inkluderer en gratis periode med adgang til Eko+.

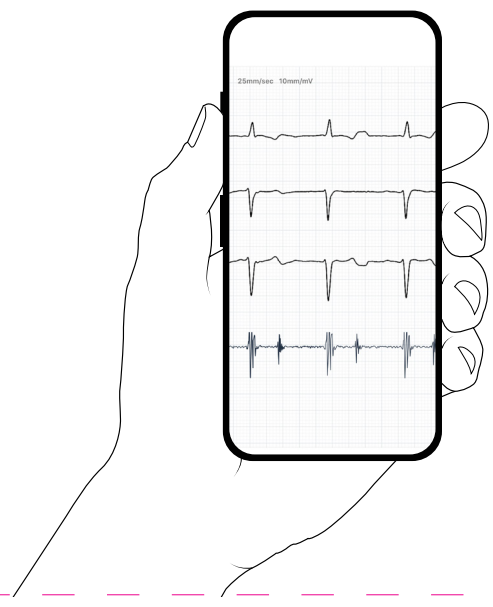

Eko+ medlemskab åbner:


- Visualisering af EKG og PCG i realtid
- Trådløs lytning
- Mislyd og AFib-detektion understøttes af Eko AI
- Optagelse, lagring og afspilning af lyd
- Patientprofiler
- PDF-rapporter
- Sikker fildeling

Besøg Eko-hjemmesiden for at finde ud af, om Eko+ er tilgængelig i dit land.

Trin 5: Forstå CORE 500-skærmen.


Følgende tips hjælper dig med at navigere på stetoskopets skærm.

HVILETILSTAND

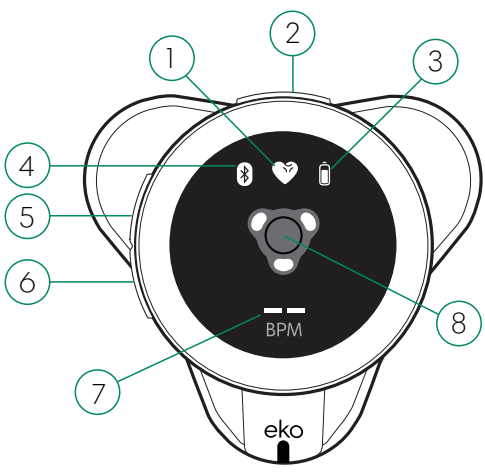

1. Aktuelt lydfilter:
   - Wide *(til alle brugssituationer, inklusive EKG)*
   - Cardiac *(til hjertelyd og EKG)*
   - Pulmonary *(til lungelyde)*
2. Den øverste knap:
   a. Skift filter:
      = tryk i <1 sekund
   b. Start optagelsen:
      = tryk i 2 sekunder
3. Batteriniveau
4. Bluetooth-forbindelse
5. Knap til at øge volumen
6. Lydstyrke ned-knap
7. Puls i realtid i slag pr. minut
8. Ledningsindikator:
   a. O= Ingen hudkontakt registreret
   b. ✓= Hudkontakt registreret

AKTIV TILSTAND

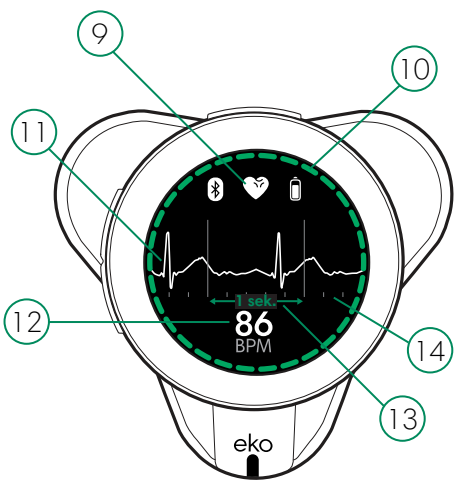


9. Aktuelt lydfilter
10. Optagelse i gang
11. EKG-bølgeform *(vist i Cardiac- og Wide-filtre)*
12. Hjertefrekvens i realtid i lag per minut
13. Intervaller på 1 sekund
14. Intervaller på 0,2 sekunder


Klargøring af huden:

- **Fugt huden** med 70 % IPA-servietter (medfølger i produktæsken), og anbring straks enheden, mens huden stadig er fugtig.
- Ved tør hud eller kraftig kropsbehåring kan det være nødvendigt med ekstra spritservietter for at forbedre signalkvaliteten.

Placering:

- Placer CORE 500 fast på patientens nøgne bryst. **Må ikke placeres over tøjet.**
- Hold enheden **lodret** for at få et optimalt signal. Det EKG, der vises på CORE 500, svarer til **modificeret afledning I.**
- Anlæg **et fast og jævnt tryk**, så huden trykkes et par millimeter ned. Sørg for, at apparatet ikke gnider mod brysthår.

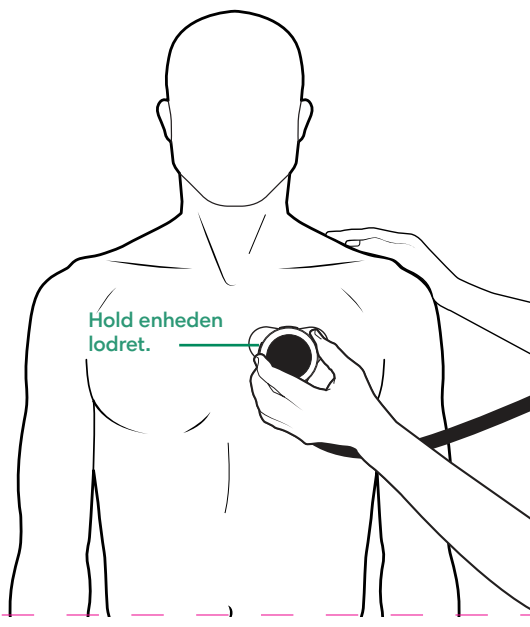

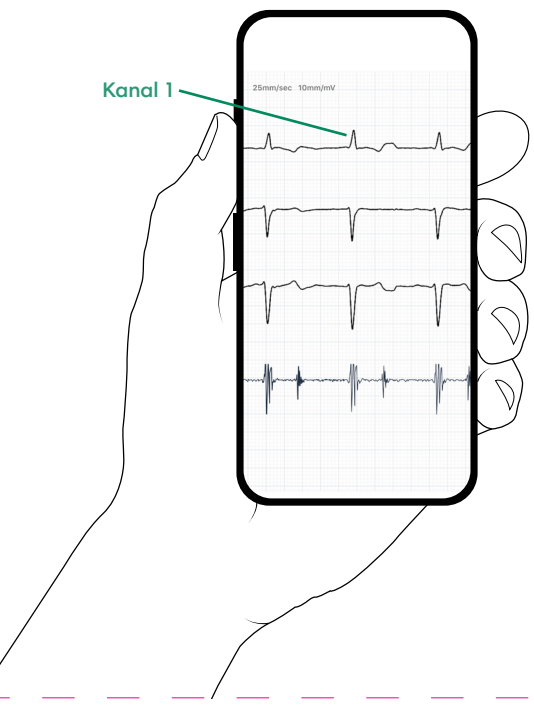

Under optagelsen:

- Din hånd og patienten skal være stille under optagelsen. Bevar kontakten, og støt patienten ved at lægge din frie hånd på hans/hendes ryg.
- **Vent 2-5 sekunder** på et stabilt signal. Flyt ikke CORE 500, mens EKG'et stabiliseres.

I Eko-appen:

- EKG-sporingen, der vises på CORE 500, spejles som **kanal 1** i Eko-appen.
- Brug Eko-appen til at fortolke og optage 3-aflednings-EKG'er til klinisk gennemgang og dokumentation.

Se på andre sprog

Se CORE 500 Quick Start Guide og Instructions for Use på andre sprog på **ekohealth.com/ifu** eller scan koden nedenfor:

Scan her

Brugere af virksomhedssoftware kan kontakte deres it-partner og/eller Eko-repræsentant med spørgsmål om onboarding.

Eko Health, Inc.
2100 Powell St, Suite 300
Emeryville, CA 94608 USA
ekohealth.com

Apple og App Store er varemærker tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes under licens.

©2025 Eko Health, Inc.
LBL391 Rev 3.0 Juli 2025